


Modelo SL60C

CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador electrónico con ajustes macro y micro
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (ambiente +5 a 70°C)
- Exactitud: 0,1°C
- Uniformidad: +- 0,7% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
60 x 40 x 40

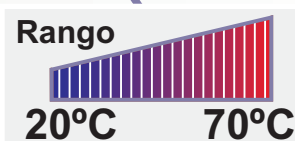

Estufa de Cultivo
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa	78 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80

Otros

Consumo Wats	300
Peso en Kg Neto	44
Peso en Kg con Embalaje	46

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Regulación Macro y Micro
- ☺ Alta Precisión
- ☺ Bajo Consumo
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar