



# SF40A

Impresora de impacto



## **El valor de OHAUS en una impresora portátil y con todas las funciones**

La nueva SF40A combina un alto rendimiento y múltiples funciones para ofrecer la calidad y durabilidad de OHAUS en una impresora portátil. La SF40A ofrece una funcionalidad avanzada en una impresora fácil de utilizar y de configurar con un valor excepcional. Esta impresora versátil es ideal para utilizarla en combinación con las balanzas OHAUS en aplicaciones para laboratorios, industria y formación con el fin de garantizar una documentación precisa de los resultado de pesaje.

### **Entre sus características de serie se incluyen:**

- **Múltiples modos y características de aplicación que ayudan al procesamiento de los informes de datos:** la SF40A está equipada con modos de totalización y estadísticas que ofrecen una funcionalidad adicional, que es de utilidad para la determinación del peso y el procesamiento de informes. La SF40A también proporciona una característica de reloj en tiempo real que incluye la fecha y la hora en la impresión. Un sistema de batería de emergencia garantiza que los datos y la fecha sean exactos.
- **La instalación y configuración sencillas ahorran tiempo:** no deje que su impresora inhiba la eficacia del proceso de pesaje. Las balanzas OHAUS mejoran la productividad y aumentan el rendimiento, y la SF40A ofrece los mismos beneficios para que su trabajo siga avanzando y pueda completarlo con la mayor eficiencia posible.

El software de configuración del PC conecta la impresora entre la balanza y el ordenador a través de un proceso rápido y práctico, además de ajustar la fecha, hora y velocidad de baudios sin problemas. RS232 con salida de datos GLP / GMP puede ayudar a que se cumplan la trazabilidad y los requisitos legales.

- **Función universal compatible con la impresión en múltiples idiomas:** la SF40A imprime en el idioma del dispositivo conectado (puede imprimir en 13 idiomas diferentes).

# SF40A Impresora de impacto

Modelo	SF40A
Número de columnas	40 columnas
Velocidad de impresión	Aprox. 1,2 líneas por segundo
Rollo de papel (An x Diá.)	Papel estándar 2,26 in. x Ø 2,36 in. máx / 57,5 mm x Ø 60 mm máx.
Requisitos de corriente	Entrada de adaptador de CA: 100-240 V CA, 50-60 Hz Salida de adaptador de CA: 12 V CC, 2,5 A
Interface	RS232C
Temperatura ambiente	32 °F - 104 °F / 0 °C - 40 °C
Dimensiones de la impresora (An x La x Al)	5,5 x 8,1 x 2,9 in / 140 x 205 x 73 mm
Peso neto	1,6 lb / 740 g (rollo de papel incluido)

## Otras características estándar


Indicador de estado, 40 caracteres por línea, compatibilidad con papel de etiquetas continuo, operaciones de puesta a cero y tara desde la impresora.

Impresión multilingüe: inglés, español, alemán, italiano, francés, chino, coreano, japonés, ruso, polaco, portugués, húngaro y checo.

## Piezas de repuesto y accesorios

Papel .....	12120799
Papel eje giratorio.....	30063920
Cartucho de tinta.....	12120798
Cable de la impresora 1 - Discovery, Explorer™, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45, MB 23/25, Ranger™, Ranger™ Count, indicadores en seco «T».....	12122603
Cable de la impresora 2 - Voyager™ Pro, Explorer™ Pro.....	80500540
Adaptador de cable.....	30059316

## Dimensiones exteriores

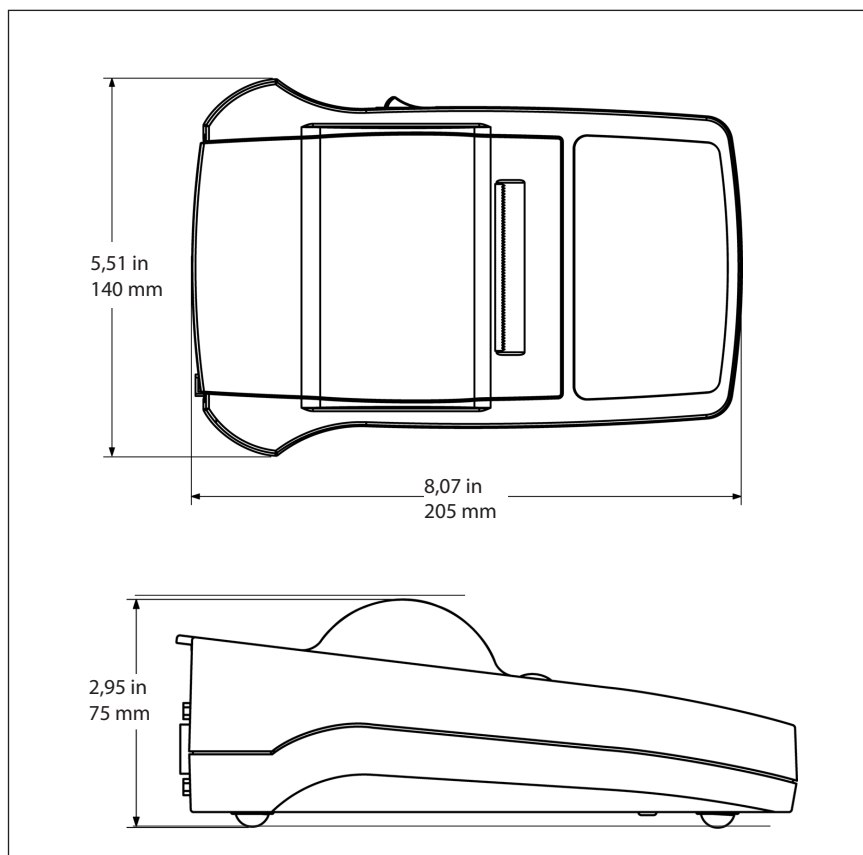

80774640 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS CORPORATION  
www.ohaus.com  
ISO 9001:2008

Sistema de gestión  
de calidad certificado

